



Spēcīgs līdz kodolam

everX FlowTM
no GC

Īso šķiedru plūstošais
kompozīts dentīna
aizvietošanai

GC

everX Flow_{no GC}

Spēcīgs līdz kodolam


Iepazīstiet **everX Flow**- ar īsām šķiedrām stiprinātu plūstošo kompozītu, kas paredzēts **dentīna aizvietošanai un restaurāciju stiprināšanai**. everX Flow pievienoto stikla šķiedru princips ir līdzīgs celtniecībā pielietotajām metāla konstrukcijām; stikla šķiedras stiprina restaurāciju un **pasargā no plaisāšanas**.

everX Flow, pateicoties vieglai aplikācijai, divu krāsu izvēlei un izcilam stiprumam, kļūs par jūsu **izvēles kompozītu visās restaurācijās, kad nepieciešams stiprs kodols**, kā arī veikt zoba stumbra atjaunošanu.



Izcila lūzumizturība izturīgām plašām restaurācijām

Lielākai daļa kompozītmateriālu ir perfekti piemērotas īpašības emaljas aizvietošanai- augsta nodilumizturība un laba estētika. Tomēr to lūzumizturība nav līdzvērtīga dentīna spējām pretoties plaisāšanai. everX Flow pārvar šo trūkumu un tam, pateicoties lielumam daudzumam īso šķiedru, kas cieši savienotas ar sveķu matricu, ir izcila dentīnam **līdzīga lūzumizturība**. Tādēļ tas apvienojumā ar emaljas aizvietošanai izmantoto standarta kompozītmateriālu, **efektīvi stiprina plašas sānu zobu restaurācijas**.

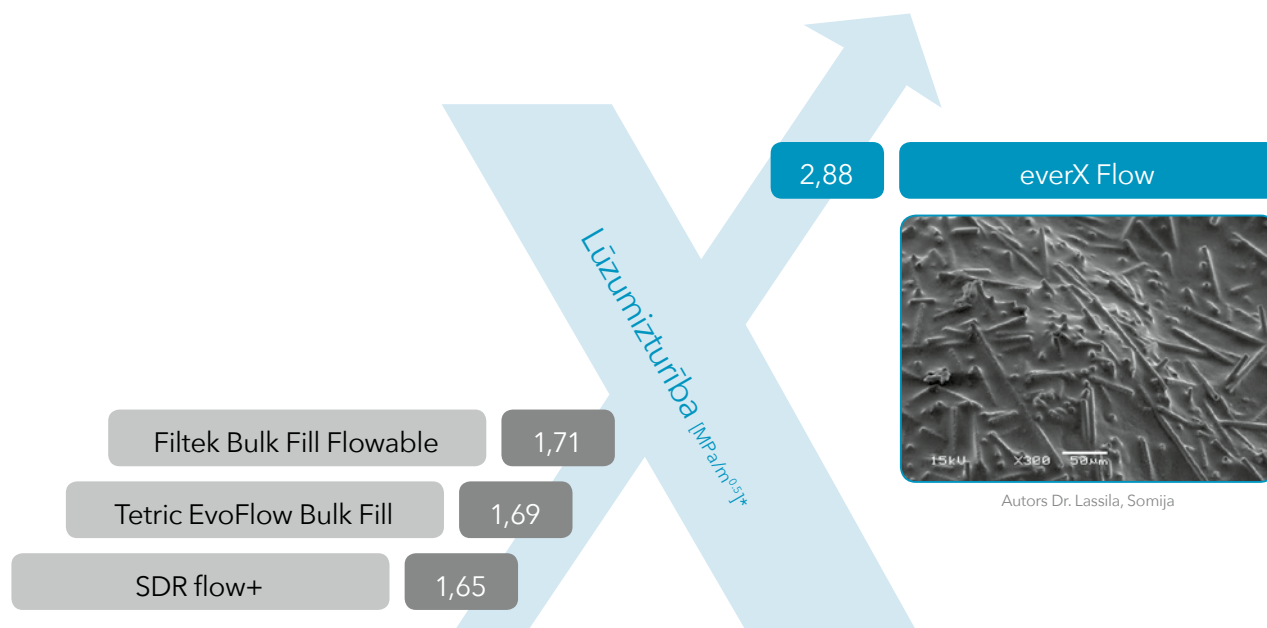


Avots: GCC R&D - dati pieejami pēc pieprasījuma.
Tests veikts pēc ASTM E399-90 (1997).

Perfektas tiksotropās īpašības **atvieglo aplikāciju** un nodrošina **izcilu adaptāciju**



Autors
Dr Javier Tapia Guadix, Spānija

everX Flow, pateicoties optimālām tiksotropām spējām palīdz izvairīties no **poru veidošanās, tas viegli adaptējas jebkuras formas preparācijai**. Tā kontrolētā plūstamība neveido notecējumus un ļauj veiksmīgi to izmantot augšžokļa molāros.

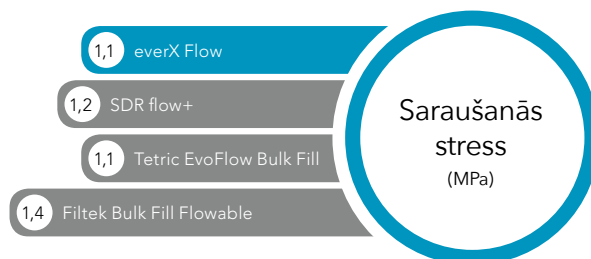

Avots: GCC R&D – dati pieejami pēc pieprasījuma.

Divas krāsas **dažādām vajadzībām**



Piemērota **dziļās sānu zobu kavitātēs**



Piemērota **estētiskiem klīniskajiem gadījumiem un stumbra atjaunošanai**

Optimāli **stiprina** plašas kavitātes un nodrošina ilgtermiņa **estētisko rezultātu**



Kavitātes preparācija



everX Flow aplikācija
(dentīna krāsa)



Pēdējais slānis ar **Essentia**
(universālā krāsa)



Postoperatīvā situācija

Autors Georg Benjamin,
Vācija



Kavitātes preparācija



everX Flow aplikācija (Bulk krāsa)



Pēdējais slānis ar **G-aenial Universal
Injectable** (A3 krāsa)



Postoperatīvā situācija

Autors Dr Lucile Dahan,
Francija

everX Flow_{no GC}

Spēcīgs līdz kodolam



Bulk
(tilpuma)
krāsa
dziļām
kavitātēm

Dentīna
krāsa
estētiskam
rezultātam



Sagatavojiet kavitāti



II klases kavitātē vispirms ar standarta kompozītmateriālu atjaunojiet trūkstošo sienu



Aizpildiet kavitāti ar everX Flow



Gala rezultāts, pēdējā slāņa atjaunošanai izmantojot standarta kompozītmateriālu

everX Flow

012898	everX Flow, šļirce 2 ml (3.7g) Bulk
012899	everX Flow, šļirce 2 ml (3.7g) Dentīns

Iepazīstiet arī



G-Premio BOND
Universālais adhezīvs



G-aenial Universal Injectable
Augstas izturības injekcijas konsistences kompozīts



Essentia Universal
Universāls pastas konsistences kompozīts

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND un G-aenial Universal Injectable ir GC tirdzniecības zīmes.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ un Tetric EvoFlow Bulk Fill nav GC tirdzniecības zīmes.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC NORDIC AB
Latvijas birojs
Ģertrūdes 113-73, Rīga
Mob.tālr. +371 29405119
info@nordic.gceurope.com
www.gceurope.com

