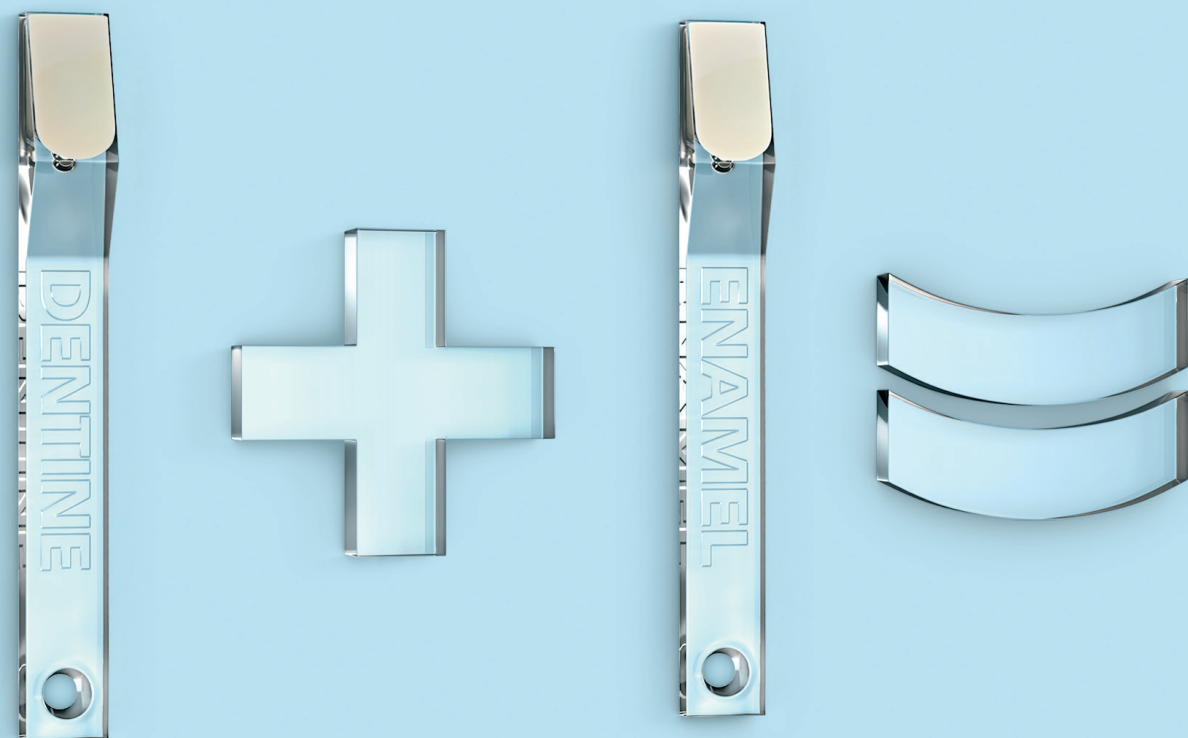




Viegls veids, kā radīt sensacionālu smaidu

vienkāršs un skaists SMAIDS

Aura ir jauns, ultra universāls restoratīvais materiāls, kas veidots, lai padarītu jūsu darbu kabinetā vienkāršāku, vieglāku un uzticamāku. Opacitāte, nokrāsa, fluorescence un plašs hroma (krāsu) klāsts – īpašības, kas raksturo dentīna krāsas, kamēr emaljas krāsas fokusējas uz caurspīdību un mirdzumu. Vienkāršs veids, kā restaurācijas padarīt patīkamākas, atvieglojot plombešanu un ātri piemeklējot krāsas!

pasūtīšanai vai papildus informācijai apmeklējiet www.sdi.com.au



Nopērkot 1 Aura Master komplektu, **DĀVANĀ** saņēms Radii Plus LED polimerizācijas lampu!

Vēlaties pamēģināt materiālu? Jautājiet mums Aura Bulk Fill paraugus!

Ātra un viegla tehnika, lai estētiski atjaunotu priekšējos zobus ar stipru molāru un premolāru hipomineralizāciju (MIH)



DR. PATRICK ROUAS,
FRANCĪJA

GADĪJUMA IZPĒTE

Lola ir 14 gadus jauna paciente, kura vēlas uzlabot savu smaidu. Viņas augšējo kreiso incīzu bija dziļi skāris MIH jeb molāru un premolāru hipomineralizācija. Uz skartā zoba bija neglīts plankums, kas ietekmēja meitenes pašvērtējumu, kad viņa smaidīja (attēls nr. 1). Tāpat bija arī neliels emaljas struktūras zaudējums labajā virsmā.

Lai risinātu šo problēmu, pirmā ārstēšana tika noteikta izmantojot sveķi infiltrācijā Icon (DMG). Tomēr MIH bija pārāk dziļi - šī tehnika tika uzskatīta par neefektīvu. Vislabākā pieeja ir izmantojot makro - abrāziju, kam seko kārtīga kompozīta materiāla, kas īpaši paredzēts, lai aizstātu zaudēto zoba struktūru.

Augšējais kreisais incīzs ar MIH (**attēls nr. 1**).

Mikro - abrāzija tika sasniegta ar ultraskaņas abrāziju (**attēls nr. 2**).

Zobs tika kodināts ar fosforskābi 20 sekundes un pēc tam skalots ar lielu daudzumu ūdens (**attēls nr. 3**).

Riva Bond LC (SDI Ltd.) saite tika izmantota atbilstoši ražotāja norādījumiem (**attēls nr. 4**).

Opakers tika uzlikts izmantojot otiņu un nogaismots (**attēls nr. 5**).

Zaudētā emalja tika aizstāta ar Aura (SDI Ltd.) toniem E1, E2 un nogaismota (**attēls nr. 6**).

Restaurācija tika pulēta izmantojot rupjo un pēc tam smalko disku. Nobeigumā restaurācija tika nopulēta ar pastu, lai sasniegtu beigu spīdumu (**attēls nr. 7**).

Koferdams tika noņemts un lielisko rezultātu apstiprināja gan paciente, gan viņas vecāki (**attēls nr. 8**).



Att.1 Augšējais kreisais incīzs ar MIH.



Att.5 Opakers tika uzlikts izmantojot otiņu un nogaismots.



Att.2 Ultraskaņas abrāzija.



Att.6 Zaudētā emalja tika aizstāta ar Aura (SDI Ltd.) toniem E1, E2 un nogaismota.



Att.3 Zobs tika kodināts ar fosforskābi 20 sekundes un pēc tam skalots.



Att.7 Restaurācija tika pulēta izmantojot rupjo un pēc tam smalko disku.



Att.4 Riva Bond LC (SDI Ltd.) saite tika izmantota.



Att.8 Koferdams tika noņemts un visi novērtēja lielisko rezultātu.



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au



www.sdi.com.au

aura
ultra universāls restoratīvais materiāls