


Sirolnspect

Atrodiet, identificējiet un uzveiciet kariesu viegli

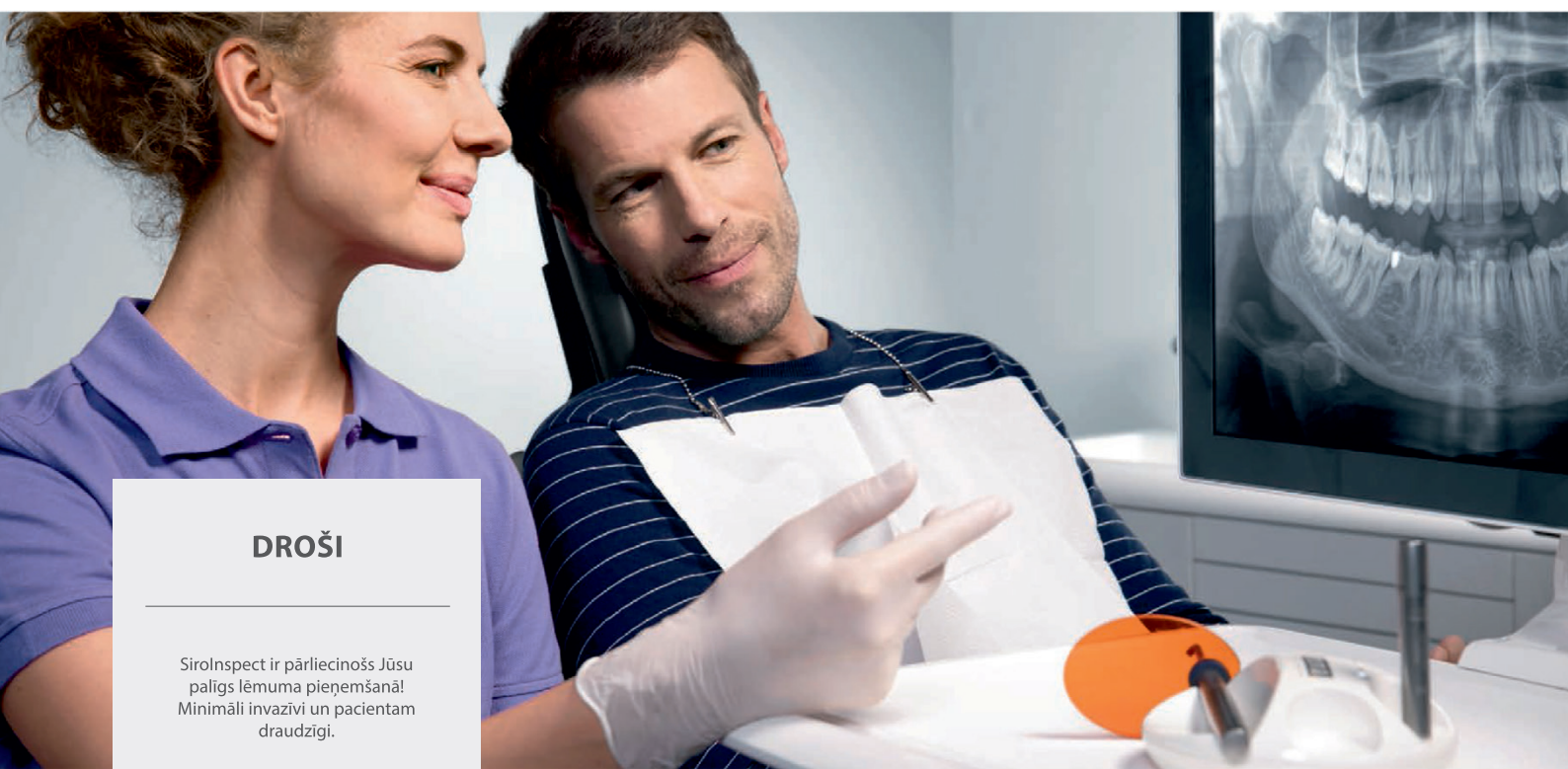

DROŠI

Sirolnspect ir pārliecinošs Jūsu palīgs lēmuma pieņemšanā! Minimāli invazīvi un pacientam draudzīgi.

ĀTRI

Tas aizņems vien dažas sekundes. Tikai nospiediet pogu un Jūs redzēsiet bojātos audus, kurus ir nepieciešams ekskvēt.

VIENKĀRŠI

Ar bezvadu Sirolnspect diagnostikas ierīci ir ērti strādāt un tā viegli iekļausies Jūsu darba plūsmā. Vienkārši un efektīvi. Piemērota darbam vairākās telpās, ērti pārvietojama.

1 Diagnostika

Vienkāršāk vairs nav iespējams! Viss, kas Jums jādara, ir ieslēdziet ierīci un sāciet pārbaudi. Tā darbojas ar atkārtoti uzlādējamu akumulatoru, un Jūs esat pilnīgi brīvs savās kustībās.



2 Optiskās šķiedras gaismas vads

Komplektā ir iekļauti divi 90° optiskās šķiedras gaismas vadi, kurus iespējams sterilizēt. Tiem ir mazs diametrs, kas nodrošina teicamu piekļuvi grūti aizsniedzamās vietās.

3 Lādētājs un diagnosticējošās brilles

Ērts un glīts bateriju lādētājs ar divām uzlādes vietām uzlādēs baterijas stundas laikā. Komplektā iekļautas arī plaša pielietojuma diagnosticējošās brilles.



Kariess fluoriscē kā sarkans.
Vienkārša diagnostika, kurai varat uzticēties.

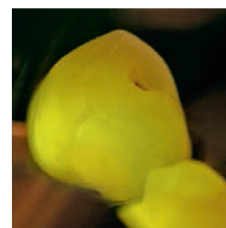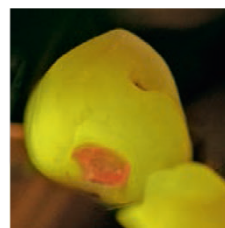


© Prof. Dr. Wolfgang Buchalla

Kā tā strādā:

Ultravioletā gaisma (~ 405 nm) baktērijām un arī veselajiem zoba dentīna audiem veicina to fluorescenci. Pateicoties īpašiem gaismas staru filtriem, veselie zoba audi šajā gaismā atšķirsies un fluorescēs zaļganā tonī, kamēr inficētie audi un baktērijas fluoriscēs sarkanā tonī. Redzami un atpazīstami uzreiz.

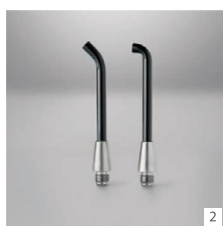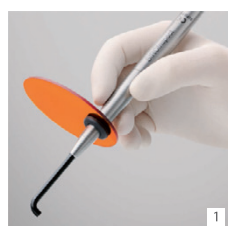


Interproksimāla kariesa diagnosticēšana premolāram

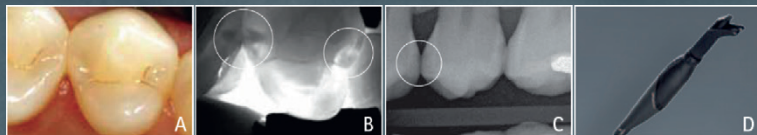

A) Klīniskā situācijā redzam kariesa neskartu premolāru. B) Izmeklējot pacientu ar DIAGNOcam, kariesu ieraugam gan uz mežlālās, gan distālās virsmas; Nevienā gadījumā nav skarta dentīna - emaljas robeža. C) Kaut gan atbilstošais rtg uzņēmums nevar tikt izvērtēts objektīvi projekcijas dēļ, attēls uzrāda kariesu emaljā uz distālās virsmas. D) Kā turpmākās procedūras ir jāiekļauj profilakse un kariesa monitorēšana, kas šobrīd vissekmīgāk izdarāms ar DIAGNOcam.

Okluzālās virsmas diagnostika molāram (slēpts kariess)

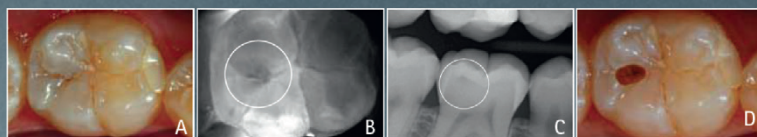

Vičuāla izmeklēšana okluzālā virsmā zobam 46 nedod pilnīgu pārliecību, ka pārkāršošanās iemesls ir kariess. B) DIAGNOcam attēlos redzam tumšākas ēnas laukumu centrālās fisūras rajonā, kas skaidri parādās arī rtg bildē (C). Kad kariozais process tiek atvērts (D), redzam, ka ar DIAGNOcam veikta diagnoze pareizi noteikusi kariozu dentīnu.

Nākotne ir diagnozei, kas brīva no rentgena starojuma

Rentgenam ir liela nozīme diagnostikā, bet ir pacienti, kuriem šīs metodes izmantošana nav ieteicama (bērni, sievietes grūtniecības laikā). KaVo DIAGNOcam ir deaudzīga visiem pacientiem un prakses personālam. Lietojiet to visiem, lietojiet tik bieži, cik vien vēlaties.



Tehniskā specifikācija

Strāva	max.0,5 A
Vads	garums 2,5 m
Svars	190 g
Apgaismojums	diode
Viļņu garums	780 nm
DIN EN 60825-1	

Diagnosticiskās ierīces

Ražotājs	Modelis	Artikuls	Indikācijas	Garantija	Cena ar PVN
GC	D-Light Pro	901412	6 Polimerizācijas lampa ar duālu staru garumu, kas arī vizualizē baktērijas, fisūras, infektētu dentīnu un mikro noplūdes, materiālu pārpalikumus un plaisas	3 gadi lampai / 1gads baterijai	1500.00 € AKCIJAS PIEDĀVĀJUMS! Kamēr pieejams no ražotāja 1149,00 Eur ar PVN + 4 G-aenial šļircēs, lūdzu, jautāt pieejamību!
Sirona	Siroinspect	6325174	5 Gludās virsmas, sakodiena vietas, proksimāls kariess un sekundārais kariess	2 gadi lampai / 1gads baterijai	750.00 €
Kavo	Diagnocam	1.001.9000	6 Gludās virsmas, sakodiena vietas, proximal, initial un sekundārais kariess, plaisas	1 gads	5200.00 €
Parkell	DIGITEST II D640E	107521	1 Pulpas testeris	1 gads	399.00 €
Kavo	Diagnodent Pen	1.002.7000	Kariesa meklētājs	1 gads	3170.00 €



D-Light Pro

Siroinspect

Diagnocam

DIGITEST II D640E

Diagnodent Pen